US/CA/UK/FR/ES/PT/DE/IT/RO

IN260300230V01

713-221V00



04 STEPS

10MIN

*EN_* **IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

*FR_* **IMPORTANT:A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

*ES_* **IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

*PT_* **IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA.**

*DE_* **WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

IT _ **IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

*RO_* **IMPORTANT: CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CON**

EN

WARNING

DO NOT use if poorly attached. If you are unable to securely fasten all parts, contact a dealer or trained technician to assemble. Take care during assembly not to lose your balance when testing the connections.
DO NOT use if any parts were damaged in shipping or become worn from use. Contact your dealer for replacement and repair before further use.
ALWAYS use the toilet seat when sitting during use. Sitting off-center or directly on the bucket may cause damage or personal injury.
DO NOT use on uneven ground or with legs at uneven heights. All four legs' rubber tips MUST touch the floor at all times.
ALWAYS take care to remain balanced while sitting and rising, using both armrests.
DO NOT exceed this product's weight limit.
NOT for use by children. Keep away from children to reduce the risk of damage or injury.

MAINTENANCE AND CARE

Clean & dry the bucket promptly after each use.
After shower, please wipe the chair clean and keep it dry.
Store in a dry-well ventilated place away from direct sunlight.

FR

AVERTISSEMENT

N'UTILISEZ PAS l'appareil s'il est mal fixé. Si vous n'êtes pas en mesure de fixer solidement toutes les pièces, contactez un revendeur ou un technicien qualifié pour procéder à l'assemblage. Veillez à ne pas perdre l'équilibre lors de l'assemblage pour tester les connexions.
N'UTILISEZ PAS l'appareil si l'une de ses pièces a été endommagée pendant le transport ou si elle est usée par l'utilisation. Contactez votre revendeur pour un remplacement ou une réparation avant toute nouvelle utilisation.
Utilisez TOUJOURS le siège des toilettes lorsque vous êtes assis pendant l'utilisation. Le fait de s'asseoir de manière décentrée ou directement sur le seau peut entraîner des dommages ou des blessures.
NE PAS utiliser l'appareil sur un sol inégal ou avec des pieds de hauteur inégale. Les extrémités en caoutchouc des quatre pieds DOIVENT toucher le sol à tout moment.
Veillez TOUJOURS à rester en équilibre lorsque vous vous asseyez et vous levez, en utilisant les deux accoudoirs.
NE PAS dépasser la limite de poids de ce produit.
NE PAS utiliser par des enfants. Tenir hors de portée des enfants afin de réduire les risques de dommages ou de blessures.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyez et séchez le seau rapidement après chaque utilisation.
Après la douche, essuyez la chaise et gardez-la sèche.
Stocker dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil.

ES

ADVERTENCIA

NO lo utilice si está mal fijado. Si no es capaz de fijar firmemente todas las piezas, póngase en contacto con un distribuidor o un técnico cualificado para realizar el montaje. Tenga cuidado durante el montaje de no perder el equilibrio al probar las conexiones.
NO lo utilice si alguna pieza se ha dañado durante el transporte o se ha desgastado con el uso. Póngase en contacto con su distribuidor para su sustitución y reparación antes de seguir utilizándolo.
SIEMPRE use el asiento del inodoro cuando se siente durante el uso. Sentarse fuera del centro o directamente sobre la cubeta puede causar daños o lesiones personales.
NO lo utilice sobre suelo irregular o con las patas a alturas desiguales. Las puntas de goma de las cuatro patas DEBEN tocar el suelo en todo momento.
SIEMPRE tenga cuidado de permanecer en equilibrio mientras se sienta y se levanta, utilizando ambos reposabrazos.
NO exceda el límite de peso de este producto.
NO debe ser utilizado por niños. Manténgalo alejado de los niños para reducir el riesgo de daños o lesiones.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Limpie y seque el cubo inmediatamente después de cada uso.
Después de la ducha, limpie la silla y manténgala seca.
Guárdela en un lugar seco y bien ventilado, alejada de la luz solar directa.

PT

AVISO
NÃO utilizar se estiver mal fixado. Se não conseguir fixar bem todas as peças, contacte um revendedor ou um técnico com formação para efetuar a montagem. Tenha cuidado durante a montagem para não perder o equilíbrio ao testar as ligações.
NÃO utilizar se alguma peça tiver sido danificada durante o transporte ou se tiver ficado gasta devido à utilização. Contacte o seu revendedor para substituição e reparação antes de continuar a utilizar.
Utilize SEMPRE o assento da sanita quando estiver sentado durante a utilização. Sentar-se descentrado ou diretamente sobre o balde pode causar danos ou ferimentos pessoais.
NÃO utilizar em terrenos irregulares ou com as pernas a alturas irregulares. As pontas de borracha das quatro pernas DEVEM tocar sempre no chão.
Tenha SEMPRE o cuidado de se manter equilibrado quando se sentar e se levantar, utilizando ambos os apoios de braços.
NÃO exceder o limite de peso deste produto.
NÃO deve ser utilizado por crianças. Manter afastado das crianças para reduzir o risco de danos ou ferimentos.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS
Limpar e secar o balde imediatamente após cada utilização.
Depois do duche, limpe a cadeira e mantenha-a seca.
Guardar num local seco e bem ventilado, longe da luz solar direta.

DE

ACHTUNG
Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn es schlecht befestigt ist. Wenn Sie nicht in der Lage sind, alle Teile sicher zu befestigen, wenden Sie sich für den Zusammenbau an einen Händler oder einen geschulten Techniker. Achten Sie beim Zusammenbau darauf, dass Sie beim Testen der Anschlüsse nicht das Gleichgewicht verlieren.
Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Teile beim Transport beschädigt wurden oder durch den Gebrauch abgenutzt sind. Wenden Sie sich an Ihren Händler, um die Teile auszutauschen oder zu reparieren, bevor Sie das Gerät weiter benutzen.
Benutzen Sie IMMER den Toilettensitz, wenn Sie während der Benutzung sitzen. Wenn Sie nicht mittig oder direkt auf dem Eimer sitzen, kann dies zu Schäden oder Verletzungen führen.
Verwenden Sie die Toilette NICHT auf unebenem Boden oder mit Beinen in ungleicher Höhe. Die Gummispitzen aller vier Beine MÜSSEN jederzeit den Boden berühren.
Achten Sie IMMER darauf, beim Sitzen und Aufstehen das Gleichgewicht zu halten und beide Armlehnen zu benutzen.
Überschreiten Sie NICHT die Gewichtsgrenze dieses Produkts.
NICHT für die Benutzung durch Kinder geeignet. Halten Sie es von Kindern fern, um das Risiko von Schäden oder Verletzungen zu verringern.

WARTUNG UND PFLEGE
Reinigen und trocknen Sie den Eimer sofort nach jedem Gebrauch.
Nach dem Duschen wischen Sie den Stuhl bitte ab und halten ihn trocken.
Lagern Sie den Stuhl an einem trockenen, gut belüfteten Ort und schützen Sie ihn vor direkter Sonneneinstrahlung.

IT

AVVERTENZA
Se non si riesce a fissare saldamente tutte le parti, rivolgersi a un rivenditore o a un tecnico specializzato per il montaggio. Durante l'assemblaggio, fare attenzione a non perdere l'equilibrio quando si testano i collegamenti.
NON utilizzare se le parti sono state danneggiate durante il trasporto o si sono usurate a causa dell'uso. Rivolgersi al rivenditore per la sostituzione e la riparazione prima dell'uso.
Utilizzare SEMPRE il sedile della toilette quando si è seduti. Sedersi in posizione decentrata o direttamente sul secchio può causare danni o lesioni personali.
NON utilizzare su terreni irregolari o con le gambe ad altezze non uniformi. Le punte di gomma di tutte e quattro le gambe devono sempre toccare il pavimento.
Fare SEMPRE attenzione a rimanere in equilibrio mentre ci si siede e ci si alza, utilizzando entrambi I braccioli.
NON superare il limite di peso del prodotto.
NON deve essere utilizzato dai bambini. Tenere lontano dai bambini per ridurre il rischio di danni o lesioni.

MANUTENZIONE E CURA
Pulire e asciugare prontamente il secchio dopo ogni utilizzo.
Dopo la doccia, pulire la sedia e tenerla asciutta.
Conservare in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano dalla luce solare diretta.

RO

AVERTISMENT

NU utilizați produsul dacă nu este fixat corespunzător. Dacă nu reușiți să fixați în siguranță toate piesele, contactați un distribuitor sau un tehnician calificat pentru asamblare. Aveți grijă în timpul asamblării să nu vă pierdeți echilibrul atunci când verificați conexiunile.

NU utilizați produsul dacă vreo piesă a fost deteriorată în timpul transportului sau s-a uzat în urma utilizării. Contactați distribuitorul pentru înlocuire și reparații înainte de a continua utilizarea.

Utilizați ÎNTOTDEAUNA scaunul de toaletă atunci când stați așezat în timpul utilizării. Așezarea descentrată sau direct pe găleată poate provoca deteriorarea produsului sau vătămări corporale.

NU utilizați pe teren denivelat sau cu picioarele la înălțimi inegale. Capetele de cauciuc ale tuturor celor patru picioare TREBUIE să atingă podeaua în permanență.

Aveți ÎNTOTDEAUNA grijă să vă mențineți echilibrul în timp ce vă așezați și vă ridicați, folosind ambele cotiere.

NU depășiți limita de greutate a acestui produs.

NU este destinat utilizării de către copii. Țineți-l departe de copii pentru a reduce riscul de deteriorare sau rănire.


ÎNTREȚINERE ȘI ÎNGRIJIRE

Curățați și uscați scaunul imediat după fiecare utilizare.

După duș, vă rugăm să ștergeți scaunul și să îl mențineți uscat.

Depozitați-l într-un loc uscat și bine ventilat, ferit de lumina directă a soarelui.

PARTS

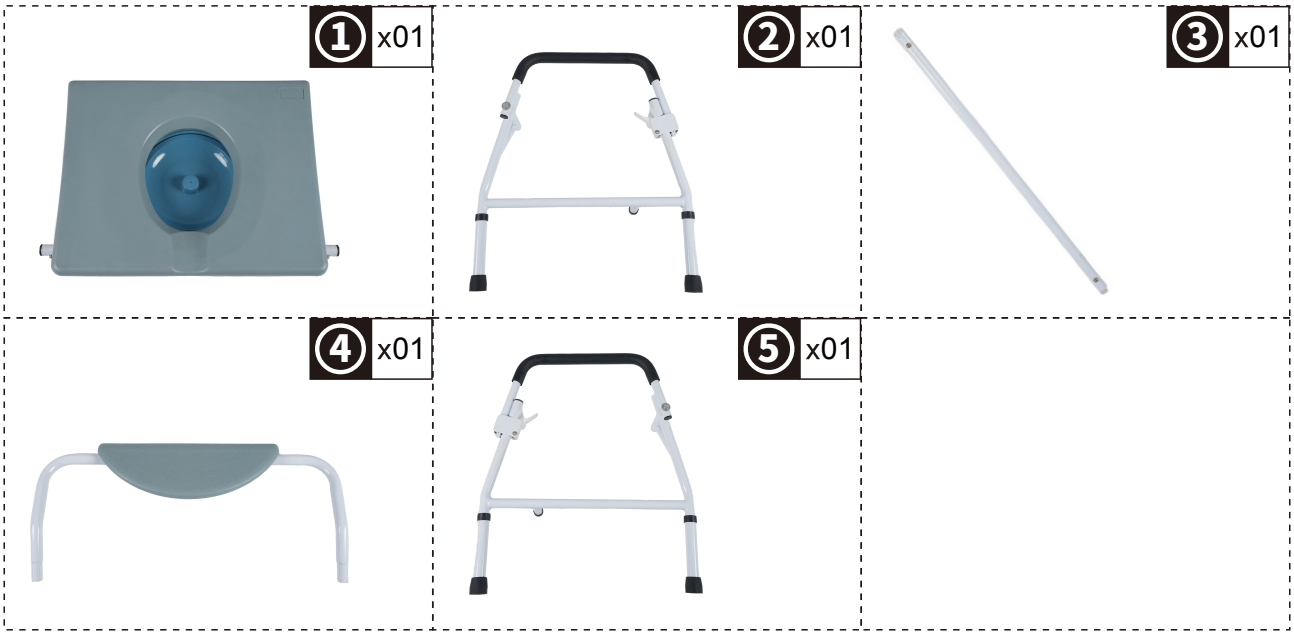

01

① x01

⑤ x01



EN_ Install the cushion ① into the armrest ⑤.

FR_ Installez le coussin ① dans l' accoudoir ⑤.

ES_ Instale el cojín ① dentro del reposabrazos ⑤.

PT_ Instale a almofada ① no braço ⑤.


DE_ Bringen Sie das Sitzkissen ① in die Armlehne ⑤ ein.

IT_ Installare il cuscino ① nel bracciolo ⑤.

RO_ Instalați perna ① în brațul de susținere ⑤.

02

③ x01

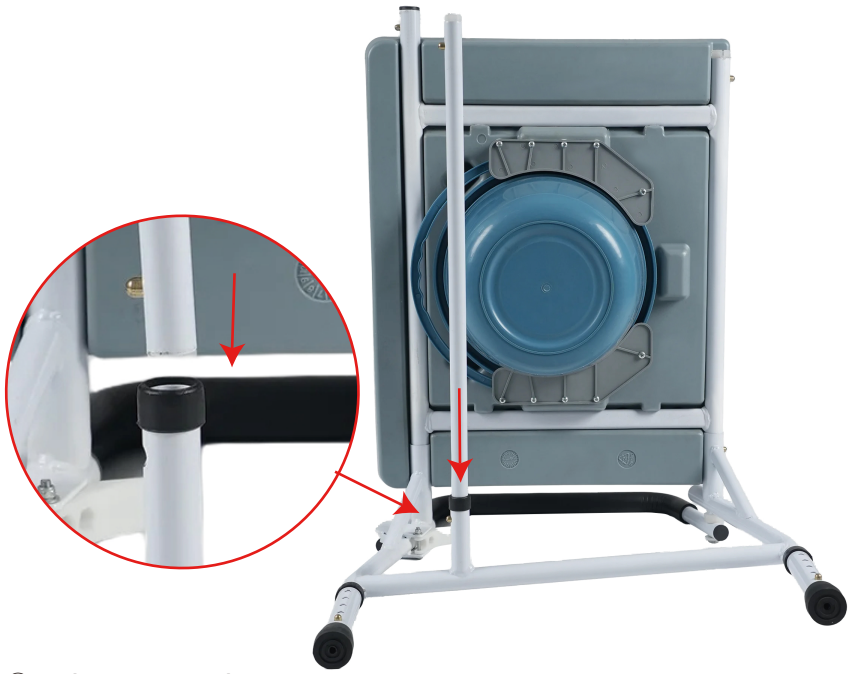


EN_ Insert tube ③ into armrest ② and secure it in place.
FR_ Insérez le tube ③ dans l' accoudoir ② et fixez-le.
ES_ Inserte el tubo ③ en el reposabrazos ② y fíjelo.
PT_ Insira o tubo ③ no braço ② e fixe-o.
DE_ Führen Sie das Rohr ③ in die Armlehne ② ein und befestigen Sie es.
IT_ Inserire il tubo ③ nel bracciolo ② e fissarlo.
RO_ Introduceți tubul ③ în brațul de sprijin ② și fixați-l în loc.

03

① x01

② x01

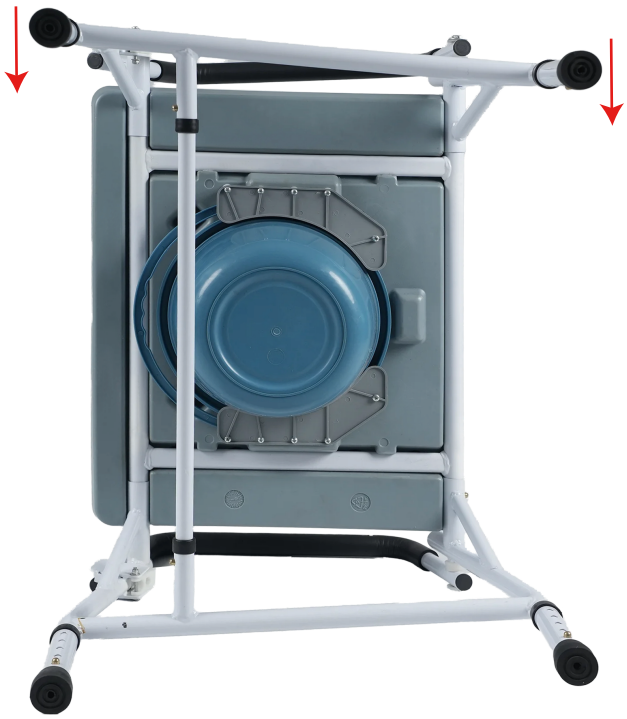

EN_ Insert armrest ② into the main frame and secure it.
FR_ Insérez l'accoudoir ② dans le cadre principal et fixez-le.
ES_ Inserte el reposabrazos ② en el marco principal y fíjelo.
PT_ Insira o braço ② na estrutura principal e fixe-o.
DE_ Führen Sie die Armlehne ② in den Hauptrahmen ein und befestigen Sie sie.
IT_ Inserire il bracciolo ② nel telaio principale e fissarlo.
RO_ Introduceți brațul de susținere ② în cadrul principal și fixați-l.

④ x01

Done



EN_ Place the main frame upright, then insert backrest ④ into the main frame.

FR_ Mettez le cadre principal à l'endroit, puis insérez le dossier ④ dans le cadre principal.

ES_ Coloque el marco principal en posición correcta e inserte el respaldo ④ en el marco principal.

PT_ Posicione a estrutura principal corretamente e insira o encosto ④ na estrutura principal.

DE_ Stellen Sie den Hauptrahmen aufrecht und stecken Sie die Rückenlehne ④ in den Hauptrahmen.

IT_ Riportare il telaio principale in posizione verticale e inserire lo schienale ④ nel telaio principale.

RO_ Așezați cadrul principal vertical, apoi introduceți spătarul ④ în cadrul principal.

US

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

UK

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente,Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente,Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
FEITO NA CHINA

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti,I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum,Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

